

# MANUXELECT



PARTNER FOR LIFE

La table d'examen et de traitement idéale pour les petits budgets et les salles de traitement de petite longueur. Grâce à sa conception la ManuXelect s'élève totalement droite. En conséquence, la ManuXelect n'occupe que 1.4 m2 de surface au sol! Les plateaux faciles à régler rendent cette table simple à utiliser. Une solution idéale et rentable pour un thérapeute qui a peu d'espace disponible. La table de traitement ManuXelect comprend 2 modèles à 2 parties et une variante à 3 parties.



ManuXelect



- Hauteur de réglage électrique de 48 à 105 cm
- Réglages des plateaux par vérins à gaz
- Poignées ergonomiques pour réglage avec une seule main
- Mouvements en ciseaux économiseurs d'espace. La table monte et descend verticalement (sans déport)
- Plateaux capitonnés avec bords souples cousus (Sellerie luxe standard)
- La fente nasale (avec bouchon en option) assure le confort du patient lors du décubitus ventral




PARTNER FOR LIFE

**ENRAF-NONIUS B.V.**  
Vareseweg 127  
3047 AT Rotterdam  
Les Pays-Bas  
T: +31-(0)10 - 203 06 00  
E: info@enraf-nonius.nl  
www.enraf-nonius.com


MANUXELECT

# MANUXELECT


## MANUXELECT 3 PARTIES

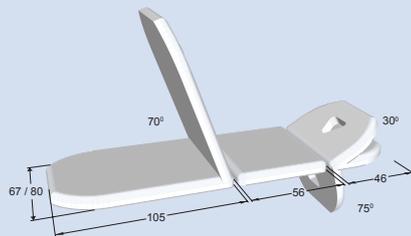


## MANUXELECT 2 PARTIES TÊTE

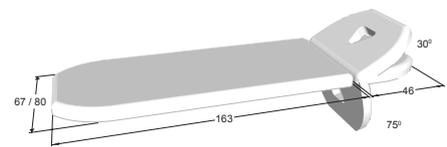

## MANUXELECT 2 PARTIES DOS

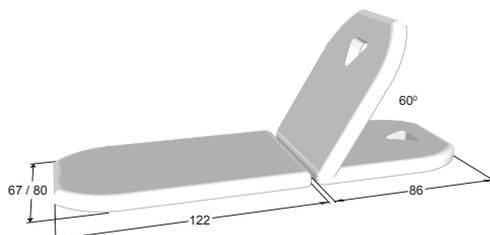


## MANUXELECT TRACTION

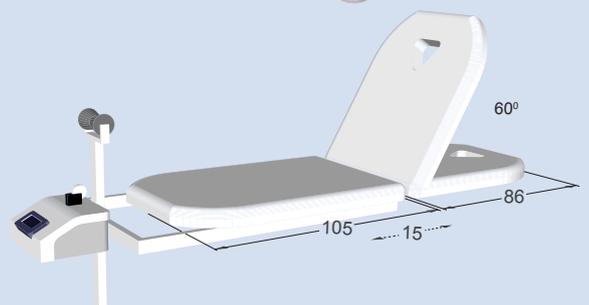

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl):	204 - 209 x 67 cm (80 cm en option)
Hauteur réglable:	environ 48-105 cm
Temps de montée (min.-max.):	environ 35 sec.
Capacité de montée: (Charge max dynamique):	150 kg (option 250 kg)
Charge max en statique:	450 kg
Voltage du réseau:	120/230VAC 50/60 Hz
Consommation du courant:	1.5 A-350W max. (version standard) ou 2.0 A-470W max. (moteur lourd)
Densité de mousse:	38 Kg/m <sup>3</sup>

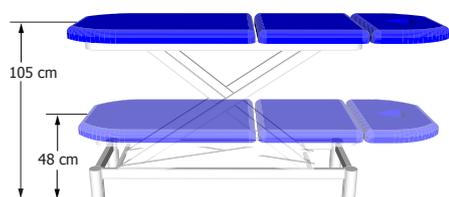

# ManuXelect



# EXECUTIVE



012  
noir



213  
gris



199  
lavande



204  
sirius blue



169  
blue barbeau



170  
blue ciel

Note: A commander avec la table.




## COLEURS CHÂSSIS



Ral 7035  
gris

CAPITONNAGE	
Largeur de plateau	Normal 4 cm épaisseur
67 cm	S
80 cm <sup>(1)</sup>	O

S = standard  
O = en option

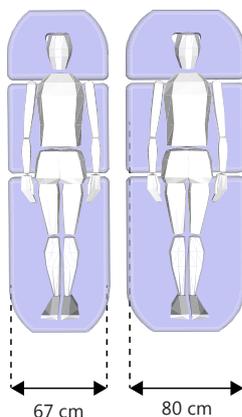

Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. Raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de châssis et de revêtement pour nos tables.

Nos revêtements en skai ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!

Note: A commander avec la table.

(1) = Non disponible pas à la variante à traction

(2) = Seulement disponible en couleurs 204, 213 et 199



# OPTIONS MANUXELECT

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- A. Électrique Commande périphérique (option)
- B. Électrique Commande au pied (option)
- C. Électrique Commande manuelle (option)



A



B



C

## CAPACITÉ DE MONTÉE

- A. Électrique - max. 150 kg (standard)
- B. Électrique - max 250 kg (option)



A




B

## AUTRES OPTIONS DES TABLES


- A. Mise sur roulettes centralisée
- B. 1550801 Interrupteur de sécurité
- C. 1550804 Support latéral rabattable (jeu de 2) <sup>(1)</sup>



A

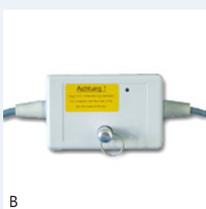

B

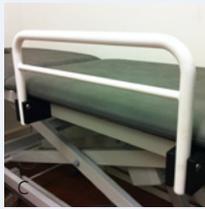


Note: A commander avec la table.

<sup>(1)</sup> = Ne convient pas pour largeur 80 cm. Et ne convient pas à la variante à traction.

## PORTE ROULEAU ET PAPIER <sup>(1)</sup>

1550800	Porte rouleau pour la ManuXelect, pour rouleaux 40, 50 & 60 cm, sous l'extrémité distale
3445280	Distributeur sur pied (indépendant) pour rouleaux 40, 50 & 60 cm
3445284	Rouleaux papier, largeur 40 cm, longueur 150 m, par 5
3445278	Rouleaux papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5
3445279	Rouleaux papier, largeur 60 cm, longueur 150 m, par 5

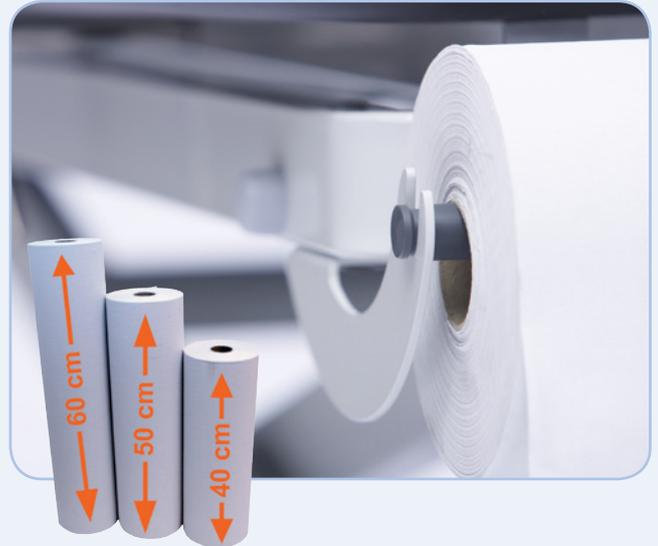

## SUPPORTS D'ACCESSOIRES <sup>(1)</sup>

1550815	Support d'épaules, noir <sup>(2)</sup> (ensemble de 2)
1550806	Rail de fixation pour supports d'épaules, d'aisselles (et pour supports gynécologiques)
1550807	Rail de fixation pour supports d'aisselles (et supports gynécologiques)
1550808	Rails de fixation pour supports d'épaules.



## SANGLES DE FIXATION

3445023	Sangles de fixation avec attache velcro longueur 120 cm
3445014	Sangles de fixation avec attache velcro longueur 160 cm
3445015	Sangles de fixation avec attache velcro longueur 240 cm
3445475	Sangles de fixation avec fermoir plastique longueur 125 cm
3445474	Sangles de fixation avec fermoir plastique longueur 350 cm



<sup>(1)</sup> = Ne convient pas à la variante à traction ou tables de 80 cm largeur.  
<sup>(2)</sup> = Nécessite rail de fixation 1550806, 1550807 ou 1550808.

## TABOURETS (DISPONIBLE DANS LES COULEURS CI-DESSOUS)

3xxx010	Tabouret, hauteur réglable 40-53 cm
3xxx011	Tabouret, mobile, hauteur réglable 59-85 cm
3xxx012	Tabouret, mobile, avec repose pieds, hauteur réglable de 59-85 cm
3xxx013	Tabouret mobile, siège anatomique, hauteur réglable de 43-56 cm
3xxx020	Tabouret mobile, siège selle, hauteur réglable de 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

## COUSSINS ET ROULEAUX (DISPONIBLE DANS LES COULEURS CI-DESSOUS)

3xxx002	Coussin demi-cylindrique, petit, spécial cheville	28x9x11 cm
3xxx003	Coussin demi-cylindrique, large	56x16x18 cm
3xxx023	Rouleau de massage	50x Ø15 cm
3xxx004	Coussin de nuque, forme sablier	30x15 cm
3xxx005	Coussin de massage	30x28x8 cm
3xxx015	Coussin de table triangulaire	50x30x15 cm
1550813	Obturateur pour fente nasale, forme triangulaire (uniquement en noir)	16,5 x 21 cm
3445297	Coussin triangulaire caoutchouc, Kaltenborn (uniquement en noir)	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sac de sable pour posture 1,2 kg <sup>(1)</sup>	15x25 cm
3446162	Sac de sable pour posture 2 kg <sup>(1)</sup>	18x27 cm
3446166	Sac de sable pour posture 4 kg <sup>(1)</sup>	25x35 cm
3446167	Sac de sable pour posture 7 kg <sup>(1)</sup>	30x45 cm

<sup>(1)</sup> = Disponible en seule gris



3xxx002



3xxx003



3xxx023




3xxx004



3xxx005



3xxx015

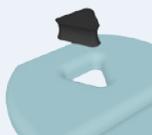

1550813



3445297



3446161



3446162



3446166



3446167

## EXECUTIVE



012

noir



213

gris



199

lavande



204

sirius blue



169

blue barbeau




170

blue ciel



## HOUSSES DE TABLE

3445240	Housse, avec ouverture pour le nez	bleue
3445241	Housse, avec ouverture pour le nez	bordeaux
3445242	Housse, avec ouverture pour le nez	blanche
3445244	Housse, avec ouverture pour le nez	jade
3445249	Housse, avec ouverture pour le nez	gris foncé
3445250	Housse, avec ouverture pour le nez	bleu royal
3445251	Housse, avec ouverture pour le nez	chameau
3445261	Housse, sans ouverture pour le nez	bleue
3445034	Housse, sans ouverture pour le nez	bordeaux
3445267	Housse, sans ouverture pour le nez	blanche
3445262	Housse, sans ouverture pour le nez	jade
3445248	Housse, sans ouverture pour le nez	gris foncé
3445247	Housse, sans ouverture pour le nez	bleu royal
3445252	Housse, sans ouverture pour le nez	chameau
3445259	Sangles élastiques pour les housses de table avec pinces aux deux extrémités, ensemble de 3	

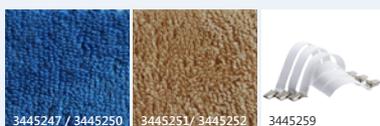


## ACCESSOIRES GYNECOLOGIQUES <sup>(1)</sup>

1550806	Rail de fixation pour supports gynécologiques (et pour supports d'épaules et d'aisselles)
1550807	Rail de fixation pour supports gynécologiques (et pour supports d'aisselles)
1550810	Supports gynécologiques confortables <sup>(2)</sup>
1550805	Supports gynécologiques <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> = Ne convient pas à la variante à traction ou tables de 80 cm largeur.

<sup>(2)</sup> = Nécessite rail de fixation 1550806 ou 1550807

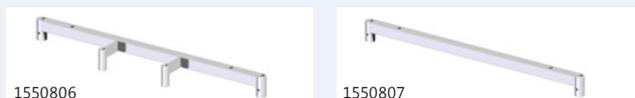

## DIVERS

3446261	Ensemble de 3 escabeaux d'exercice, 50 x 38 x 32 cm, 40 x 32 x 21 cm et 30 x 22 x 14 cm
---------	---



3446261



# MANUXELECT TRACTION



La variante à traction de ManuXelect dispose d'une section de table mobile qui peut rouler sur 15 cm pour la réalisation d'une thérapie de traction. Cette section de table peut aussi être verrouillée pour une utilisation conventionnelle.


Votre table de traction ManuXelect est fournie en standard avec une rainure de fixation au niveau de la tête et un châssis de traction pour la fixation de l'unité de traction Eltrac 471.

Les options pour le réglage de la hauteur et la capacité de charge patient de la table de traction ManuXelect sont identiques à celles des autres variantes ManuXelect.

Attention ! La traction ManuXelect est uniquement disponible en gris (numéro de couleur 213) et en bleu Sirius (numéro de couleur 204), et avec une largeur de table de 67 cm.

## ACCESSOIRES DE TRACTION

3xxx014	Repose-jambes gris, avec hauteur réglable pour chaque jambe, disponible en couleurs différentes
3445022	Ceinture pelvienne en canevas à fermeture Velcro
3445021	Ceinture thoracique en canevas à fermeture Velcro
1471808	Unité de traction clinique Saunders y compris étrier de fixation pour l'unité Eltrac 471
1671901	Eltrac 471, unité de traction

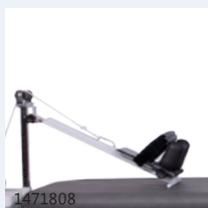

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl): environ 240 x 67 cm (avec traction châssis)  
Section de jambe mobile: 15 cm  
Avec arrêt: oui

Voir la brochure Eltrac 471 pour davantage d'explication.

