
# RADARMED 650+ EN 950+



Apparaat voor microgolftherapie

Les Radarmed 650+ et 950+ sont des appareils de traitement moderne pour la thermothérapie par micro-ondes avec une fréquence de 2450 MHz (12 cm vagues). L'option de dosage sûre basée sur la chaleur de la patiente est un avantage majeur de la thérapie à micro-ondes. Micro-ondes thérapie est facile à appliquer grâce à l'application unipolaire. Le elekctrode n'entre pas en contact avec le patient et est donc facile, sûr et hygiénique à appliquer.



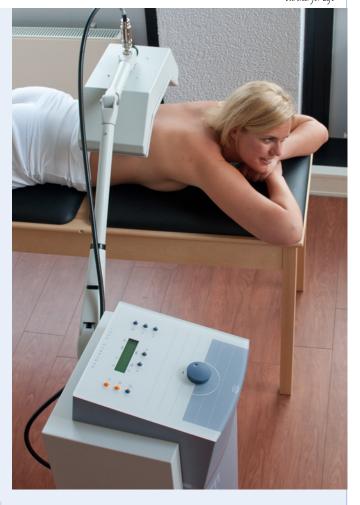

- Mode continu ou pulsé
- Puissance 250 Watts
- Les paramètres sont clairement visualisés sur le panneau de contrôle
- Les paramètres restent visibles tout au long du traitement
- 49 protocoles de traitements préétablis
- 30 programmes libres

ENRAF-NONIUS
Boîte Postale 12080
3004 GB Rotterdam
Les Pays-bas
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

# RADARMED 650+ EN 950+



### 1435901 RADARMED 650+


Appareil pour la thérapie à ondes micro pulsées et continues L'intensité et le temps de traitement sont validés à l'aide de touches digitales sur le panneau de controle. Les différents émetteurs peuvent être connectés aisément au bras articulé grâce à un



#### 1435911 RADARMED 950+

Si Radarmed 650 +, mais avec écran LCD. La convivalité et la fonctionnalité sont au centre de notre développement. Les paramètres sont clairement visualisés sur le panneau de contrôle et réglés à l'aide d'un commutateur central et de touches digitales. Les paramètres restent visibles tout au long du traitement.



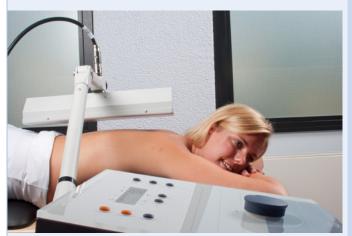

## ACCESSOIRES STANDARDS

1409813 Câble Haute Fréquence, 250 Watt, pour Radarmed 1435750/51<sup>(1)</sup> Mode d'emploi Radarmed 650+/950+ <sup>(1)</sup>

3442039 Bras porte-électrode du Radarmed 3444298 Câble secteur 230V-EUR

(1) = modèle dépendant



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ultrasons: continu et pulsé
Fréquence: 2450 MHz ± 50 MHz

Positions programmable: seulement avec Radarmed 950+

Mode continu HF: 0-250 W à 50 Ohm

Mode pulse HF: 0-250 W avec une puissance max. fixe du

1500 W, ± 30%

Positions programmable: oui

Voltage: 220-240 V (± 10%)

Fréquence: 50/60 Hz Comsommation du courant: 1000 VA

Poids: 45 kg (bras incluse)

Dimensions: 93x39x49 cm

(LxPxA, roues incluse)

# ACCESSOIRES RADARMED



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES PRINCIPAUX	
1462484	Circuplode Ø 140 mm, Curapuls 670
1462514	Circuplode Ø 90 mm
1462521	Circuplode-E
3441306	Tube néon
1480803	Fiche pour sangle de fix. à Câble d'égalisation de potentiel 5 m
1462540	Bras porté-électrode blanc, pour Curapuls













1480803 3442022



### **MOBILIER POUR ONDES COURTES ET MICRO-ONDES**

Surtout pour le traitement par ondes courtes et équipements micro-ondes, nous offrons une variété de meubles, comme une chaise et une table de traitement, entièrement libre de métal. Ce champ est généré par l'équipement de zones touchées, empêchant la concentration de la chaleur.

3441401 Table de thérapie en bois verni naturel, 190x60x75 cm

3441337 Siège de thérapie, en bois verni naturel

3441338 Escabeau en bois verni naturel



